



STAY YOUNG COLLECTION.

FIATALOS FORMÁK
EGY ÚJ GENERÁCIÓNAK

BY CANDULOR



ORIGINAL
SWISS
DESIGN

PHYSIOSELECT TCR

A PhysioSelect TCR friss és fiatalos designja, a már bizonyított fogformákból ered. A megbízható ikerkeresztműköteses resin anyagot alapul véve alkották meg a fogakat, amelyeket Svájcban terveztek. Egy egész generáció élethez való újfajta hozzáállását tükrözi: For the new attitude to life of an entire generation: az örök fiatalok «Best Agers»:

A STAY YOUNG COLLECTION.

A JÖVŐ VÁSÁRLÓI.

Az örök fiatalok
«Best Ager» generáció.

A vásárlók új generációja, akik törekednek arra hogy a lehető legtöbb szempontból fiatalosak maradjanak – mobilisan és agilisan lépnek az idősebb korba anélkül, hogy elveszítenék fiatalos külsejüket. A PhysioSelect TCR úgy lett kifejlesztve hogy találkozzon a vásárlók törekvéseivel, céljaival.



INDIKÁCIÓK, FIATALÍTÓ HATÁSSAL.

Fiatalos, autentikus és funkcionális.



TELJES KIVEHETŐ PÓTLÁSOK

- › Fog és az antagonista fog viszonya (Gerber)
 - › Fog és 2 antagonista fog viszonya
Hármasegység
-



RÉSZLEGES KIVEHETŐ PÓTLÁSOK

- › Részleges, műanyag alaplemez és fémlemez pótlások
 - › Kombinált fogpótlások
-

FIATALOS FOGFORMÁK A TÖKÉLETES «BEST AGER» KINÉZETHEZ

Változatosság egy pillanat alatt.

Bizonyítottan, a vonzó fogformák megfiatalodtak és egyesültek, hogy egy fiatalos szortimentet hozzanak létre. 18 felső front forma a Delicate (Finom) Vigorous (Élénk) és Universal (Univerzális) típusokból és 4 alsó front fogforma került kialakításra, hogy lefedje a «Best Ager» vásárlók kéréseinek teljes spektrumát. Az élethez való új hozzáállás az elsődleges.

A VÁLTOZATOS FIATALOS FOGFORMÁK ELŐNYEI

› Páciens

PhysioSelect TCR megerősíti a «Best Ager» páciensek fiatalos hozzáállását az élethez.

› Fogtechnikus

Széleskörű fogformák és méretek a napi részleges és teljes fogpótlások kivitelezéséhez.

› Fogorvos

A «Best Ager» fiatalos életszemléletű betegek számára az optimális fogpótláshoz szükséges kollekció.

DELICATE Group 5
nőies

- › Finom fogmorfológia
diszkrét mamelon
struktúrával



UNIVERSAL Group 6
unisex

- › Sokoldalú fogmorfológia



VIGOROUS Group 7
férfias

- › Erőteljes karakterisztika egy
élénk, erőteljes fogformával
és határozott kontúrokkal és
szögelfutásokkal



AZ ANYAG: TWINCROSSEDRESIN


Évtizedek óta tartó, állandó anyagminőség.

Az erősen keresztkötéses TCR anyag a lenyűgöző és ellenálló tulajdonságairól híres.

TCR resin (TwinCrossedResin = Keresztkötéses Resin) egy erősen módosított poly-methyl-methakrilát (PMMA) változat, amelyben mind a polimer, mind a matrix is egyenlően keresztkötéses. Ezt úgy lehet elérni, hogy a már korábban keresztkötéses polimert keresztkötésekkel összekapcsoljuk a matrixal. Ez biztosítja a fogak optimális abrázio – és plakkellenállását.

TWINCROSSEDRESIN

Erőteljes keresztkötés, PMMA hálózat megnövekedett keresztkötéses polymerláncokkal.

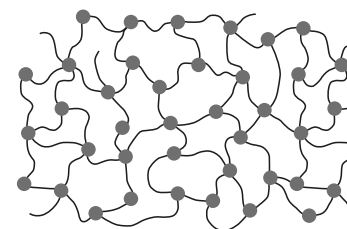

 Polymer láncok  Megnövekedett keresztkötés

NÉZZE MEG & ÉREZZE AZ ÚJ KOLLEKCIÓT

Olyan fiatalos amilyenre csak vágyik.

Hogyan lehetséges egy ilyen fiatalos fogforma elérése? A PhysioSelect TCR enyhén transzlucens incizális kontúrok, diszkrét mamelonok és transzlucens marginális gerinclefutások egyedi összetétele, amely négyszeres rétegzéssel és incizális fény refrakcióval társul.

A felszíni struktúra az eddig megjelent termékek közül egy fogvonalhoz sem hasonlítható. A finom mikrostruktúra a horizontális lefutásokkal, a kiemelkedő makrostruktúra a vertikális szélekkel, árkokkal és finom nyitásokkal, és az optimális fény refrakció megadja a fogak természetes, fiatalos kinézetét.



Lateral view – PhysioSelect TCR



Lateral view – BonSelect TCR



JÓ FOGFELÁLLÍTÁS.
JÓ FOGPÓTLÁS.
BONSELECT TCR.

A multifunkcionális posterior fogak.



Az új posterior BonSelect TCR fogakat kifejezetten a PhysioSelect TCR – fogakhoz alkották meg. Ezek a posterior fogak egy olyan okkluzális koncepción alapulnak, melynek köszönhetően a leggyakoribb fogfelállítási rendszerekben, multifunkcionálisan alkalmazni lehet őket.

Akár fog – fog vagy fog – és két fog érintkezésén alapuló fogfelállításról van szó, a BonSelect TCR bi-funkcionális fog geometriája lehetővé teszi mindkét fogfelállítási rendszer alkalmazását. Leegyszerűsített centrikus meghatározás és a határozott kontaktpontok egy könnyen kialakítható okklúziót eredményeznek. A BonSelect TCR kiváló választás olyan laborok számára amelyek különböző fogfelállítási rendszert alkalmaznak.

A posterior régióban lévő fogak rétegzése megegyezik PhysioSelect TCR anterior fogvonallal. Harmónia a designban és funkcióban.

TCR-BŐL KÉSZÜLT MÉG TÖBB FOGFORMA?

Fedezze fel a 18 fiatalos PhysioSelect TCR formákból és 22 PhysioSet TCR kornak megfelelő fogformákból álló, teljes iker keresztkötéses resin fogak széles választékát.



CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T +41 (0) 44 805 90 00
F +41 (0) 44 805 90 90
candulor.com / candulor@candulor.ch

Hivatalos magyarországi forgalmazó:

DentAvantgArt
D i v i s i o n • K f t.

DENTAVANTGART
H-9400 Sopron
Virágvölgyi u. 59.
T 99 314 931
www.dentavantgart.hu
info@dentavantgart.hu