

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology





PRETTAU[®] 2 DISPERSIVE[®]

Természetes színátmenetekkel a monolitikus, leplezés nélküli körhidakért

PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

A Prettau® híd már több mint 10 éve a világ minden táján élő betegeknél alkalmazzák. Több tízezer felépítmény készült már el hozzáértő kezek által, egyénileg a páciensre individualizáltan (színezve). Minden egyes ilyen munka hozzájárult az új, Prettau® 2 Dispersive® zirkon kialakításához. A végeredmény, egy kimagaslóan transzluens, és rendkívül rugalmas zirkon anyag lett, amelyet már a gyártás folyamatakor magas esztétikai minőségű, természetes színekkel ruháztak fel. Annak érdekében, hogy egy felettebb finom, különösen egységes színátmenetet kapjunk a színterelési folyamat után fontos, hogy a színeket nem rétegenként alkalmazzuk, hanem finoman szétszórta, dispersive. Az esztétikai követelményektől függően, a felépítményeket további, kézzel történő individualizálással tehetjük egyedivé a Color Liquid-ek, kerámiák és különböző színezők, anyagra történő felvitelével. A biokompatibilis zirkon, amelyet monolitikusan vagy akár redukált módon is felhasználhatunk, tökéletesen megfelel nem csak szőlőkoronák de teljes körhidak alapanyagaként is.

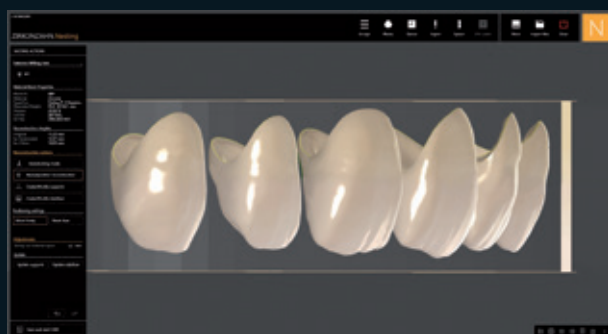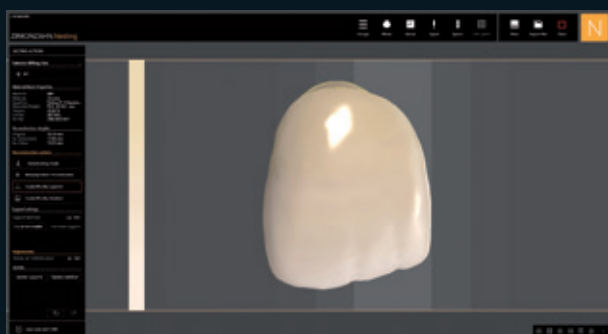

A Zirkonzahn.Nesting szoftverében, a megtervezett fogpótlás úgy állítható be, hogy a későbbi árnyalatnak tökéletesen megfeleljen az előre színezett tömbben.



Színterelés után egy természetes színárnyalatot kapunk, anélkül hogy manuálisan tovább színeznénk.

HATÁROK NÉLKÜLI ZIRKON

Szóló koronáktól körhidakig, monolitikusan vagy redukált tervezéssel



ÚJ! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Előre színezett zirkon természetes színárnyalattal, tökéletes hajlítószilárdsággal és egészen magas transzlucenciával (elérhető a VITA A1-D4 árnyalataiban).
- Az tömb színezete reprodukálja a természetes fog árnyalatait dentintől egészen az éli színéig, és már nincs szükség a manuális színezésre színterelés előtt, de felhasználható, egyénre szabott individualizáció esetén.
- Nincsenek határok! Kiválóan alkalmas körhidak (teljes anatómikus, redukált, vagy kerámiával leplezett) készítéséhez, de készíthetők belőle szőlő koronák, inlay-ek, onlay-ek, veneerek, stégek, és többtagú hidak is.
- A teljes anatómiai kialakításnak köszönhetően, nincs kerámia lepattogzás, és antagonistával szembeni abrázio.
- Színterelés után, tovább individualizálható az ICE Zirkon Stains Prettau® és ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger anyagokkal.




HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

DentAvantgArt Division Kft. – Tel +36 99 314 931 – info@dentavantgart.hu – www.dentavantgart.hu
Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

PRETTAU®

T1

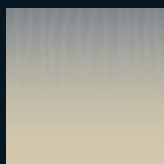

COLOUR
LIQUID

PRETTAU® 2


T2



DISPERSIVE®

PRETTAU® 3


T3

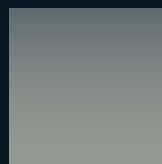

DISPERSIVE®

PRETTAU® 4
ANTERIOR®

T4

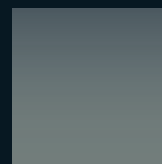

DISPERSIVE®